



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### МАССАЖЕР Модель: SA-5315



- Ручной вибрационный массажер для тела
- 3 насадки (круглая, пальцевая, турбинная)
  - Максимальная мощность 28 Вт
    - 5 режимов
- 6 уровней интенсивности

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

## **Внимание!**

Имеются противопоказания. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

### **Использование прибора противопоказано:**

- беременным женщинам;
- людьми с сердечными заболеваниями и людьми с кардиостимуляторами;
- людьми с подтвержденным диагнозом рак;
- в чувствительных зонах: шейного и спинного отделов позвоночника, лица и головы;
- при наличии различного рода повреждений кожи в районе массажа, в том числе ожогах и кожных заболеваний;
- в период приема болеутоляющих и успокоительных средств.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности, в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

**Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с руководством по эксплуатации.**


## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь ремонтировать прибор своими силами. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость во избежание повреждения прибора.
- Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или подвергался иным сильным механическим воздействиям.
- Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Запрещается использовать прибор водителю во время управления транспортным средством.
- Запрещается использование прибора во время недомогания или сонливости.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра.
- При появлении неприятных ощущений или недомогания во время массажа прекратите сеанс и обратитесь к врачу.
- Используйте прибор только по его прямому назначению, следуя рекомендациям в руководстве.

- Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какие-либо вещества и в помещениях с высокой влажностью.
- Запрещается накрывать прибор во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

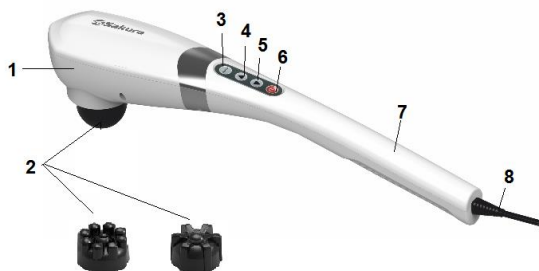

1. Корпус
2. Сменные насадки: круглая, пальцевая, турбинная
3. Выбор режима "auto" (5 режимов)
4. Увеличение скорости (3 режима)
5. Уменьшение скорости (3 режима)
6. Включение/выключение
7. Рукоятка прибора
8. Сетевой шнур

## РАБОТА ПРИБОРА

- Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии).
- Протрите корпус и насадки прибора влажной тканью.
- Наденьте необходимую массажную насадку на головку прибора (вкрутить по часовой стрелке).
- Проверив соответствие параметров электросети данным, указанным на приборе, подключите штекер шнура питания к сети.
- Нажмите кнопку включения/выключение. По умолчанию включается первый режим и средний уровень интенсивности.
- Нажмите кнопку "auto", чтобы сменить режим на нужный. Всего 5 режимов на выбор.
- Нажмите кнопку увеличения или уменьшения скорости, чтобы отрегулировать уровень интенсивности в соответствии с вашими требованиями. Всего 6 режимов на выбор.
- Рекомендуется устанавливать первоначально небольшую скорость и увеличивать интенсивность по мере адаптации.

- По окончании работы выключите прибор, нажав на кнопку включение/выключение, и выньте вилку из розетки.

#### **РЕКОМЕНДАЦИИ:**

- Для получения оптимальных результатов, рекомендуется использовать прибор ежедневно по 10-15 минут.

- Не массируйте один участок тела более 3 минут.

- Не используйте прибор более 15 минут. По истечении 15 минут непрерывной работы прибор отключится автоматически.

- Массаж рекомендуется проводить по схеме «сверху вниз» (от шеи к спине).

- Людям с повышенной тактильной чувствительностью для дополнительного комфорта можно положить на массируемую часть тела полотенце.

- Сеанс массажа лучше проводить через час после приема пищи.

- Основные области применения: шейно-воротниковая зона, шея, плечи, спина, бедра, икры, ступни ног.

- Не используйте прибор для массажа головы.

#### **УХОД ЗА ПРИБОРОМ**

1. Выключите прибор из сети.

2. Корпус прибора протрите мягкой сухой тканью без применения чистящих средств. Допускается чистка влажной мягкой тканью с использованием неагрессивных чистящих средств, после этого необходимо протереть прибор насухо.

3. Снимите насадки массажера (откручивайте против часовой стрелки), протрите влажной мягкой тканью с использованием неагрессивных чистящих средств, протрите насадки насухо.

4. Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаниях температуры.

#### **УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА**

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

#### **РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю. Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан на сайте [sakura-dt.com](http://sakura-dt.com)

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:

- технику с механическими повреждениями;
- нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
- последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер	1 шт.
Насадки	3 шт.
Руководство по эксплуатации (включая гарантийный талон)	1 шт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	220-240В/50-60Гц
Максимальная мощность	28 Вт
Материал корпуса	ABS
Длина шнура	1,65 м
Вес прибора	1,1 кг

**Срок службы прибора – 5 лет**

**Производитель:** WENZHOU ICARE ELECTRIC CO.,LTD

Адрес: Room 1205-1207, Vanke Center, No,2088, Wenzhou Rd, Wenzhou, Zhejiang, China (Китай).

**Импортёр:** ООО “Сакура Электроникс Групп”

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

№ партии: **CAG2215A049**

Дата изготовления: **07/2022**

Сделано в КНР



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Отметки о продаже:

Наименование товара	
Модель	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес, телефон фирмы-продавца	

М.П.,

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись продавца) (расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю приемку товара, пригодного к эксплуатации, а также свое согласие с гарантийными условиями. К внешнему виду и комплектности претензий не имею.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя) (расшифровка подписи)

### Сведения о ремонте:

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)