


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

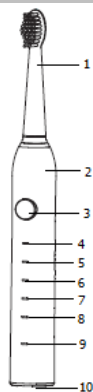

1. Насадка – головка зубной щетки
2. Ручка зубной щетки
3. Кнопка включения/выключения и переключения режимов
4. Индикатор режима «Чистка»
5. Индикатор режима «Полировка»
6. Индикатор режима «Деликатно»
7. Индикатор режима «Отбеливание»
8. Индикатор режима «Массаж»
9. Индикатор зарядки
10. Разъем подключения кабеля USB для зарядки

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Электрическая зубная щетка предназначена для удаления зубного налета и остатков пищи с зубов с целью снижения риска образования кариеса и улучшения здоровья зубов и полости рта. Прибор предназначен исключительно для домашнего использования.

Данный прибор не предназначен для детей до 6 лет. Дети от 6 до 14 лет и лица с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом могут использовать зубную щетку под контролем лиц, отвечающих за их общую безопасность, либо после инструктирования по вопросам использования и мерам безопасности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед первым использованием зубной щетки.

• В случае если Вы проходите стоматологическое лечение, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом-стоматологом перед началом использования.

Внимание: при первом использовании может ощущаться зуд или наблюдаться слабое кровотечение. Это связано с тем, что ваши десна еще не привыкли к настолько эффективной чистке. Рекомендуется первое время использовать режим работы «Деликатно». Как правило, через 1-2 недели эти симптомы исчезают. Если они не исчезнут через 2 недели, прекратите использование прибора и обратитесь к стоматологу.

Предупреждение:

• Пользователи, которым установлен внутри челюстной зубной имплантат или которые получают стоматологическую помощь по лечению зубов, деформации зубов и челюстей, должны пользоваться изделием с учетом рекомендаций стоматолога.

• Зубная щетка Sakura соответствует стандартам безопасности для электромагнитных устройств. В случае появления сомнений по поводу кардиостимулятора или других имплантированных устройств, проконсультируйтесь с врачом перед первым использованием прибора.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

- Держите розетку и зарядное устройство вдали от воды.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками.
- Не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.
- Проверьте зарядный шнур на предмет повреждений перед первым использованием и в дальнейшем использовании прибора.
- Не используйте прибор в душе или во время ванн.
- Не используйте прибор вблизи от воды, находящейся в ванной, раковине, и т.д.
- Убедитесь в том, что зарядное устройство полностью сухое, перед тем как включать его в источник питания.
- Не включайте прибор в электросеть с напряжением не соответствующим указанному на приборе или на зарядном устройстве. Вы можете повредить их.

• Не используйте прибор, если его шнур или зарядное устройство повреждено, если прибор работает неправильно, если прибор упал или повредился или упал в жидкость.

• В случае поломки обратитесь в сервисный центр официального дистрибьютора. Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

• Держите провода вдали от горячих поверхностей.

Примечание:

• Данное изделие предназначено для чистки зубов, десен и языка. Используйте его строго по назначению. При возникновении боли и дискомфорта немедленно прекратите использование зубной щетки и обратитесь к врачу.

• Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.

• Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам слишком сильно и не касайтесь их никакими другими пластиковыми деталями щетки, кроме щетины.

• Не чистите одну область в течение продолжительного времени.

• Храните прибор в недоступном для детей месте. Зубная щетка содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены детьми, а также острые предметы, которые могут поранить ребенка.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

Для зарядки аккумулятора необходимо прибор подключить в электросеть к устройству или блоку питания с USB разъемом – адаптеру (5V, 1A) посредством кабеля, входящего в комплект.

Заряжайте прибор при температуре от 15 до 35 °C.

1. Аккуратно вставьте один штекер кабеля, входящего в комплект в разъем для зарядки (10), второй штекер подсоедините к адаптеру.

2. Аккуратно вставьте адаптер в розетку.

3. Если прибор разряжен, то при подключении зарядки индикатор зарядки будет гореть красным. Время полной зарядки аккумулятора составляет 1,5-2 часа, в зависимости от источника питания. По завершении зарядки индикатор загорится зеленым светом.

Внимание: если вы не использовали прибор более 6 месяцев, оставьте его заряжаться минимум на 12 часов. После такой полной зарядки прибор может работать до 45 дней при условии ежедневного использования (2 раза в день по 2 минуты).

Во время зарядки запрещается пользоваться прибором!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

• Прикрепите головку зубной щетки к ручке зубной щетки.

• Смочите головку щетки и нанесите на нее зубную пасту. Вы можете пользоваться любым типом зубной пасты. Чтобы избежать разбрызгивания, поднесите головку зубной щетки к зубам в полости рта, затем включите ее с помощью кнопки включения (3).

• Начните чистить зубы выметающими движениями от линии десен до режущего края зуба. Следите за тем, чтобы щетинки чистящей головки располагались под углом 45° к линии десен. Сначала очистите внешние поверхности зубов, затем внутренние и закончите чисткой жевательных поверхностей зубов.

• С помощью кнопки включения/выключения (3) Вы можете переключать режимы очистки во время работы зубной щетки.

• Чистка зубов длится не менее 2-х минут – по 30 секунд на квадрант. Короткая пауза в работе щетки укажет, когда нужно переходить к следующему участку. Если работу щетки не приостановить, то через 2 минуты работы она автоматически отключится.

Режимы чистки

1. Режим «Чистка» - обеспечивает эффективное удаление налета для правильной ежедневной гигиены полости рта и ухода за зубами и деснами.

2. Режим «Полировка» - комбинированный режим с автоматическим переключением скорости колебаний щетинок для очистки от чайного, кофейного и других типов налета, а также для придания дополнительного блеска эмали.

3. Режим «Деликатно» - подходит для пользователей, которые имеют проблему кровоточивости десен, стоматит, удаленные зубы, зубные имплантаты, брекеты.

4. Режим «Отбеливание» - применяется для очистки стойкого налета от чая, кофе, сигарет.
5. Режим «Массаж» - эффективное очищение и массаж десен.
Примечание: Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку (сменную насадку) каждые 3 месяца. Если щетинки износятся до истечения данного срока, необходимо заменить сменную насадку и снизить давление на зубы и десны при чистке зубов.

ОЧИСТКА И УХОД

- После использования выключите зубную щетку, снимите головку зубной щетки, промойте ее под водой и просушите.
- Ручку зубной щетки очистите с помощью полотенца или мягкой ткани.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных на сайте www.sakura-dt.com
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку, настройку изделия у владельца и не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
 - признаках самостоятельного ремонта, неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации;
 - при попадании внутрь прибора воды, посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями или действиями посторонних лиц;

- при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
- при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.

Срок службы прибора: 2 года.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Сменная головка зубной щетки	2 шт.
2. Ручка зубной щетки	1 шт.
3. USB кабель для зарядки	1 шт.
4. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота пульсации: 38000 импульсов в минуту
Тип аккумулятора: Li-ion 500 мАч
Время работы аккумулятора: до 45 дней
Номинальная мощность: 1,8 Вт
Номинальное напряжение: 3,7 В, 0,55 А
Время зарядки аккумулятора: 2 часа
Автоотключение: через 2 минуты работы
Степень пылевлагозащиты: IPX7
Условия хранения: от -10°C до +40°C
Размеры в индивидуальной упаковке: 83*38*230 мм

Производитель:
NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road,
Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, Китай

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, Северный проезд, 24а.
Тел.: +7 (383) 210-54-30, www.sakura-dt.com

№ партии: 23S5054
Дата изготовления: 06/2023
Сделано в КНР



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметки о продаже:

Наименование товара	
Модель	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес, телефон фирмы-продавца	

М.П.

_____/_____
(подпись продавца) (расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю приемку товара, пригодного к эксплуатации, а также свое согласие с гарантийными условиями. К внешнему виду и комплектности претензий не имею.

_____/_____
(подпись покупателя) (расшифровка подписи)

Сведения о ремонте

№	Дата	Код Работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял, подпись заказчика



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА
Модель: SA-5561
Артикулы: SA-5561W, SA-5561BK



Технология чистки: звуковая	5 режимов работы
38 000 колебаний в минуту	100% удаляет налет
2 насадки в комплекте	USB зарядка

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником дома и в дороге. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.