




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА SA-5560

Тип: портативный	3 режима работы
Давление струи: 275 - 827 кПа.	100-240 В, ~50/60 Гц
Резервуар для воды: 230 мл	Зарядка USB

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником дома и в дороге. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

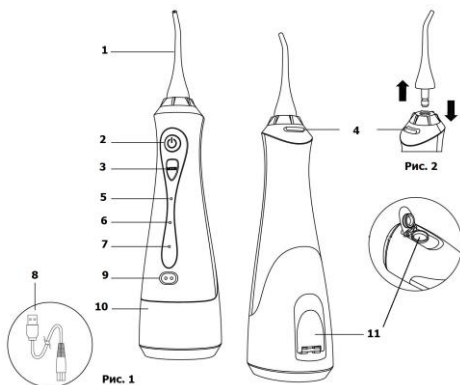

1. Насадка
2. Кнопка включения/выключения
3. Кнопка переключения режимов «MODE»
4. Кнопка фиксации насадки
5. Индикатор «Бережный режим»
6. Индикатор «Нормальный режим»
7. Индикатор «Пульсирующий режим»
8. Шнур питания USB
9. Разъем подключения шнура питания для зарядки
10. Резервуар для воды
11. Отверстие для заливки воды

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Портативный ирригатор для полости рта предназначен для профессионального ухода за полостью рта в домашних условиях и в дороге. Подходит для:

- комплексного ухода и гигиены за полостью рта и межзубными промежутками;

- ухода за полостью рта при наличии мостов, имплантов, коронок, брекетов и ортодонтических систем;
 - профилактики кровоточивости десен, кариеса, гингивита, заболеваний пародонта.
 - массажа десен, чистки щек и языка от болезнетворных бактерий и медикаментозного орошения слизистой оболочки полости рта.
- Область применения: для индивидуального и семейного использования.

Применение ирригатора противопоказано:

- в случае, если у вас была недавно сделана операция полости рта или десен;
- в стадии обострения хронических заболеваний полости рта.

Перед применением ирригатора рекомендуется проконсультироваться со стоматологом!

Внимание: Во время первых применений ирригатора может иметь место незначительная кровоточивость десен, которая должна прекратиться в течении 1-2 недель, если у вас здоровые десны. Если по истечении 2-х недель применения кровоточивость продолжается, прекратите использовать прибор и проконсультируйтесь со стоматологом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

- Держите розетку и зарядное устройство вдали от воды.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками.
- Не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.
- Проверьте зарядный шнур на предмет повреждений перед первым использованием и в дальнейшем использовании прибора.
- Не используйте прибор во время ваннных процедур.
- Не располагайте и не храните прибор вблизи от воды находящейся в ванной, раковине, и т.д.
- Убедитесь в том, что зарядное устройство полностью сухое, перед тем как включать его в источник питания.

- Не включайте прибор в электросеть с напряжением не соответствующим указанному на приборе или на зарядном устройстве.
- Не используйте прибор, если его шнур или зарядное устройство повреждено, если прибор работает неправильно, если прибор упал или повредился или упал в жидкость.
- В случае поломки обратитесь в сервисный центр официального дистрибьютора.
- Держите провода вдали от горячих поверхностей.
- Не используйте прибор, если насадка потеряна.
- С особым вниманием отнеситесь к инструктажу людей со сниженными физическими и умственными возможностями или отсутствием опыта и знаний, касающихся использования прибора.
- Не пускайте прямую струю воды под язык, в ушной канал, нос и т.д. Прибор способен нанести вред в этих и других участках тела, потому что струя воды находится под давлением.
- Не заполняйте бак водой горячее 40°C.
- Контролируйте, чтобы дети не играли с прибором. Использование ирригатора детьми возможно только с 6 лет и строго под присмотром взрослых.
- Не прижимайте сильно ирригатор к зубам и деснам. Вы можете повредить их.
- Если вы испытываете боль в зубах и деснах, а также при наличии ранок в полости рта и на языке, не используйте прибор и обратитесь к стоматологу.

Обязательно к исполнению!

• Поддерживайте гигиеническую чистоту прибора и используйте для очистки рта только свежую или слегка подогретую водопроводную воду, либо специальные ополаскиватели для ирригаторов.

Внимание: запрещается использовать в качестве растворов для ирригации полости рта вещества и растворы, содержащие: взвешенные частицы (отвары, суспензии, настой), маслосодержащие растворы, антисептические растворы, солевые, зубную пасту или химические вещества, а также обычные жидкости для полоскания рта.

• Обязательно выливайте остатки воды из резервуара и включите

прибор на 2-3 секунды для его полного осушения после использования.

- В случае несоблюдения санитарно-гигиенических норм использования прибора в нем может развиваться плесень и бактерии, что может нанести вред здоровью. Это также может привести к возникновению неприятного запаха и неполадок в работе.

Не разбирать!

- Ни в коем случае не видоизменяйте прибор. Также не разбирайте и не ремонтируйте его. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.

ЗАРЯДКА ИРРИГАТОРА

Для зарядки аккумулятора необходимо ирригатор подключить в электросеть к устройству или блоку питания с USB разъемом – адаптеру (5V, 0.7-1A) посредством кабеля, входящего в комплект. Заряжайте прибор при температуре от 15 до 35 °C.

1. Аккуратно вставьте штекер в гнездо для зарядки (убедитесь, что в гнезде не осталось никакой жидкости перед тем, как вставить штекер).

2. Аккуратно вставьте адаптер в розетку.

3. Если прибор был полностью разряжен, то при подключении зарядки сначала замигает нижний индикатор «Пульсирующий режим», затем начнет мигать индикатор «Нормальный режим» и после «Бережный режим». Когда все три индикатора будут гореть, не мигая, прибор заряжен полностью.

Время полной зарядки аккумулятора составляет 4-5 часов, в зависимости от источника питания.

Внимание: во время зарядки запрещается пользоваться прибором!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИРРИГАТОРА

- Установите насадку в её гнездо. Вставляйте насадку аккуратно до щелчка (Рис.2). Чтобы снять насадку нажмите на кнопку фиксации насадки (4) и выньте насадку.

- Отсоедините шнур зарядки от блока питания, чтобы заполнить резервуар.

- Откройте крышку резервуара и, держа устройство в горизонтальном положении (Рис.3), заполните резервуар водой, не превышающей 40°C. Закройте крышку и проверьте, чтобы она была

плотно закрыта.

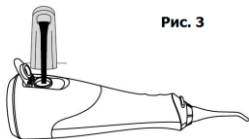


Рис. 3

Внимание: не используйте заполненный водой ирригатор без насадки. Это может привести к его поломке. Не включайте прибор, если в резервуаре для воды нет воды, за исключением случая, когда выливаете оставшуюся после использования воду. Работа устройства без воды может привести к его отказу.

- Перед включением прибора поместите насадку ирригатора в полость рта. Нагнитесь над раковиной и держите устройство в строго вертикальном положении, направив насадку на зубы. Для предотвращения разбрызгивания слегка прикройте рот во время ирригации.

- Прибор имеет две кнопки на передней панели. Нажмите кнопку включения/выключения прибора (2). При включении устройство начинает работать в ранее выбранном режиме, индикатор режима покажет, какой режим включен. С помощью второй кнопки переключения режимов (3) выберите нужный вам режим. Всего их три:

1. «Бережный режим» - для нежной очистки чувствительных зубов и десен.

2. «Нормальный режим» - эффективное очищение полости рта.

3. «Пульсирующий режим» - очищение и массаж десен.


- Во время ирригации вы можете менять режим. Повторное нажатие кнопки после включения в течение 6 секунд после включения изменяет режимы работ. Полностью залитый резервуар для воды обеспечит около 60 секунд использования устройства. Держите рот чуть приоткрытым, чтобы вода могла вытекать.

- Направьте струю как можно более перпендикулярно в межзубное пространство или зубодесневые складки. Медленно перемещайте вдоль зубного ряда. Особенное внимание необходимо уделять обработке межзубного пространства и области вокруг брекетов.

Для лучших результатов начинайте с области коренного зуба (задние зубы), переходя постепенно к передним зубам. Следуйте вдоль десен, останавливаясь у межзубных промежутков. Продолжайте до тех пор, пока все области вокруг и между зубами

не будут полноценно очищены. Однако, помните, что ирригация полости рта не заменяет чистку зубов. Чистите зубы и зубные протезы после приема пищи, а затем используйте ирригатор.

Внешняя сторона зубного ряда

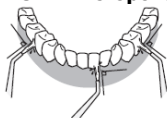

- Направляйте струю перпендикулярно к зубам.
- Особенное внимание необходимо уделять обработке межзубного пространства и зубодесневых складок.

Внутренняя сторона зубного ряда




Верхние зубы

- Отрегулируйте угол насадки так, чтобы она была направлена вертикально вверх, и направьте струю перпендикулярно к зубам.

Нижние зубы

- Опустите подбородок и направьте струю перпендикулярно к зубам.

Внимание: не направляйте струю непосредственно в зубодесневые карманы!

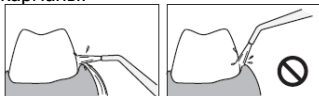

- После использования нажмите на кнопку включения/выключения (2) для выключения ирригатора и вытащите прибор из полости рта.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

- Не отсоединяя насадку ирригатора, откройте крышку резервуара для воды и слейте воду.
- Включите прибор на несколько секунд, чтобы скачать всю оставшуюся воду. Затем отключите прибор.
- Протрите ирригатор сухой тканью.

Внимание: всегда сливайте оставшуюся воду. Это поможет предотвратить загрязнение и рост бактерий в неиспользованной воде.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Перед тем, как вымыть отключите от источника питания.

Насадка

- Насадка снимается при нажатии на кнопку освобождения насадки (4).
- Промойте ее в воде и вытрите тканью.

Основной блок

- Удалите загрязнения, протерев корпус тканью, смоченной в жидком моющем средстве, затем вытрите сухой тканью.
- В случае сильного загрязнения промойте в воде.
- Не применяйте растворители, бензин, спирт и прочее. Это может привести к возникновению неполадок в работе, растрескиванию или обесцвечиванию частей прибора.
- Не мойте прибор в воде, температура которой превышает 50 °С.
- Не оставляйте прибор в воде.
- Хорошо просушите после мытья водой и вытрите сухой тканью.

Резервуар для воды

- Промойте резервуар для воды водой.
- После очистки вылейте воду из резервуара
- Если не предполагаете использовать прибор в течение недели и больше, просушите резервуар изнутри и снаружи.

Храните прибор в сухом, чистом и прохладном месте, недоступном для детей.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.

- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
 - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ирригатор	1 шт.
2. Насадка	1 шт.
3. USB шнур для зарядки	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень давления воды: 275 - 827 кПа

Частота пульсации: 1200 импульсов в минуту

Емкость резервуара: 230 мл

Влагозащита: IPX7

Тип аккумулятора: Li-ion аккумулятор 1800mAh

Время работы аккумулятора на одной зарядке: 60 минут

Номинальное напряжение: 100-240 В, ~50/60 Гц

Номинальная мощность: 5 Вт

Зарядное устройство (адаптер): 5.0 V, 1A

Время зарядки аккумулятора: 2-4 часа

Время работы прибора при полном резервуаре: 60-80 секунд в зависимости от режима работы

Автоотключение: через 3 минуты работы

Условия применения: от 0°C до 40°C при относительной влажности не более 85%

Условия хранения: от -10°C до +40°C относительная влажность не более 85%.

Вес изделия: 295 г

Размеры в индивидуальной упаковке: 255*120*75 мм

Производитель: NINGBO QSKIN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

Адрес: C2-1009 Fortune Building, No. 858 Fuming Road, Ningbo, Китай

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com

№ партии:

Дата изготовления:

Сделано в КНР

DN1209SAKURA-W

03/2021

