



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА SA-5311

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры сети: 9 Вт , 220-240 В, 50 Гц

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Чтобы массажер прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Данная модель предназначена для массажа тела с использованием инфракрасного прогрева или без него.

Инфракрасное излучение проникает глубоко внутрь тканей, прогревает их и позволяет сделать массаж еще более эффективным. ИК лампу можно использовать также без вибромассажа, для прогрева.

Массаж с помощью данного прибора полезен в следующих случаях:

- При радикулите и остеохондрозе
- При дискинезии кишечника и заболевании желчных путей в хронической форме
- При бронхиальной астме (но не в стадии обострения)
- При пневмонии в стадии ремиссии
- При полиартрите и ожирении
- При целлюлите
- При расстройствах нервной системы
- При подготовке к физическим нагрузкам и для закрепления результатов после них

Имеется ряд медицинских противопоказаний, внимательно прочитайте раздел «Меры предосторожности»!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом работы прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Перед подключением, убедитесь, что параметры электросети соответствуют 220-240В~50/60Гц
- Прибор предназначен только для бытового использования. Запрещается использование прибора в профессиональных целях или не по назначению!
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- При отключении тяните за вилку, а не за кабель питания.
- Не используйте насадки, не входящие в комплект поставки.
- Не допускайте падения или повреждения прибора.
- Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра.
- Отключайте прибор перед очисткой.
- Отключайте прибор, если он не используется.
- Следите за целостностью кабеля питания прибора. Запрещается использовать прибор с поврежденным кабелем! Если кабель поврежден, обратитесь для авторизованный сервисный центр для его замены.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте неисправный прибор.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ

НЕЛЬЗЯ использовать прибор при следующих заболеваниях:

- Высокая температура, лихорадка (массаж может спровоцировать судороги)
- Воспаления кожи (воспаление может распространиться в более глубокие слои тканей)
- Рахит и лимфаденит (возможны травмы)
- Гемофилия и геморрагический диатез (возможно внутреннее кровотечение)
- Острый гепатит и туберкулез
- Гипертония и врожденный порок сердца
- Сосудистые заболевания (тромбоз, варикоз, аневризма)
- Вибрационная болезнь

Перед применением прибора **рекомендуется проконсультироваться** с врачом:

- Беременным женщинам

- Людям, страдающим заболеваниями сердца
- При заболеваниях мышц, суставов
- В случаях других проблем со здоровьем


ВНИМАНИЕ!

- Не используйте инфракрасную лампу на уровне глаз
- Массаж должен проводиться в вентилируемом пространстве, не накрывайте прибор при его использовании!
- После 20 минут массажа прибор нужно отключить и дать ему остыть до комнатной температуры **в течение 20 минут.**

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. КОТОРЫЕ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА

- 1) Не смазывайте жиром участки кожи, подлежащие воздействию, за исключением проработки мышц глубоких слоёв
- 2) Вибромассаж области живота, поясницы и ног проводится **лёжа**, остальные виды массажа – **сидя**.
- 3) При первых процедурах продолжительность массажа не должна превышать 3-5 минут, затем время массажа можно постепенно увеличить до 15 минут.
- 4) Сеансы массажа в начале лучше всего проводить через день. При явных признаках благоприятного воздействия можно перейти на ежедневный массаж.
- 5) Пользуйтесь прибором не менее, чем через 1 час после приёма пищи.
- 6) Не используйте прибор непосредственно перед сном
- 7) Не используйте прибор, если температура окружающей среды выше 37°C
- 8) Если во время использования Вы испытываете тошноту, головокружение, боль или другие неприятные симптомы, немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к врачу.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

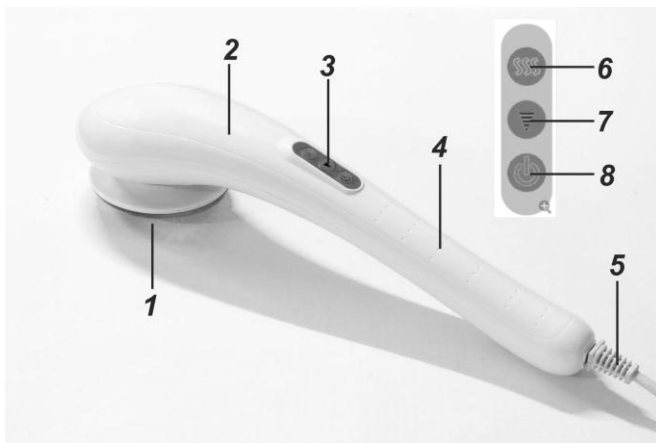

1 – массажная головка с ИК лампами

2 – моторная часть прибора

3 – панель управления с кнопками

4 – ручка прибора

5 – кабель питания

6 – кнопка включения ИК ламп

7 – кнопка настройки

мощности (3 режима)

РАБОТА ПРИБОРА

- Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал, протрите корпус прибора и насадки влажной тканью.
- Включите прибор в сеть.
- Нажмите нижнюю кнопку (включение). По умолчанию включается режим средней мощности
- С помощью панели управления, выберите нужный режим:
 - ИК прогрев – нажать 1 раз верхнюю кнопку для включения, 2 раза для выключения.
 - Вибромассаж – выбрать мощность с помощью средней кнопки (3 режима)
- По окончании работы выключите прибор нажатием кнопки и выньте вилку из розетки.



УХОД И ХРАНЕНИЕ

- **Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой.** При необходимости протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.
- Насадки можно чистить ватой, смоченной в спирте.
- Тщательно просушите все насадки перед хранением
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);

- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Срок службы прибора: 5 лет

Дата производства: 10-2021

Производитель: Wenzhou Kexin Health Product Co.,Ltd

Адрес: NO.A-888 SunAo Road, Feiyun New Area , Ruian City, Wenzhou, Zhejiang, China (Китай)

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088 Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, д.24А

www.sakura-dt.com

